

neno[®]

denti

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



5. ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

1. Покладіть головку щітки на пристрій. Її слід надіти на пластикову частину зі світлом всередині.
2. Натисніть кнопку живлення щітки, щоб увімкнути світло головки пристрою.
3. Видавіть зубну пасту на щітку.
4. Аккуратно притисніть зубну щітку до зубів і ясен.
5. Знову натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути вібрацію щітки та починайте ретельно чистити зуби дитини. Кожен 30 секунд чистення зубна щітка перестав вібрувати протягом 1 секунди, щоб користувач міг змінити щітковий простір. Правильне чистення зубів загалом має зайняти 2 хвилини. Пристрій автоматично вимкнеться через 2 хвилини.
6. Коли закінчите чистити зуби, вимкніть зубну щітку, натиснувши ще раз кнопку живлення.
7. Після очищення зубів дитини вийміть зубну щітку під проточною водою. Видаліть залишки води із щетини щітки та протріть м'якою тканиною ручку пристрою.
8. Коли ви не використовуєте щітку, тримайте її вертикально.

ПРИМІТКА: щоб уникнути розбризкування зубної пасти, вимкніть пристрій, перш ніж виймати його з рота дитини. Заради гігієни та безпеки вашої дитини замінійте головку щітки кожні три місяці.

Дорогий клієнт,
дякуємо за придбання NENO DENTI. Ви отримали виріб - електричну зубну щітку для маленьких дітей. Цей пристрій використовується для чистення зубів дитини та підтримки гігієни порожнини рота.
Перед використанням пристрою прочитайте інструкції нижче.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Якщо ви не розумієте інструкцій із використання та запобіжних заходів, перелічених у цьому посібнику, не використовуйте пристрій. Неправильне використання пристрою може пошкодити його.
2. Не розбирайте виріб. Це може призвести до пошкодження виробу, ураження електричним струмом та анулювання гарантії.
3. Не використовуйте аксесуари, крім рекомендованих виробником.
4. Не використовуйте легкозаймисті або вибухонебезпечні речовини для очищення виробу.
5. Цей продукт використовується лише для чистення зубів та масажу ясен. Не використовуйте пристрій для будь-яких інших цілей.
6. Припиніть користуватися пристроєм, якщо він явно пошкоджений.
7. Не занурюйте виріб у воду. Це може призвести до несправності та пожежі, ураження електричним струмом або вибуху.
8. Тримайте пристрій подалі від контейнерів для води, таких як ванна або раковина.
9. Не замінюйте акумулятор пристрою, коли ваші руки мокрі.
10. Не використовуйте у своєму пристрої використані старі акумулятори.
11. Зверніть увагу на полюси акумулятора, коли розміщуєте його в пристрої.
12. Не розміщуйте пристрій у приміщеннях із високою вологістю або високою температурою, таких як ванні кімнати.

6. ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Чистення щітки:
a. Вийміть головку щітки та її щетину після використання пристрою і дайте їй висохнути природним шляхом.
b. Не натискайте на щетину і не витягуйте їх пальцями. Це може деформувати зубну щітку і зруйнувати її.
c. Протріть ручку м'яким шматочком тканини і дайте їй висохнути природним шляхом.
d. Не занурюйте ручку під воду.
e. Не використовуйте для очищення пристрою воду вище 40°C або кислотні чистячі засоби.

2. Поширені запитання:
Вібрації слабшають під час використання:
Ви занадто сильно натискаєте на зубну щітку. Він повинен акуратно торкатися зубів.

7. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Джерело живлення: 1x батарея AAA
Водонепроникний: IPX7
Нейлонова щетина: Так
Штрихів за хвилину: 17000
Вбудований таймер: Так
Вбудований світлодіод: Так
Розміри: 149x28x28mm
Вага: 28 г.

13. Вийміть акумулятор з пристрою, якщо ви не будете користуватися ним протягом тривалого періоду часу, щоб уникнути ризику пожежі.
14. Якщо використовувана зубна паста містить перекиси або бікарбонат (часто присутній у відбілюючих пастах), ретельно промийте пристрій після використання, щоб уникнути руйнування його пластикової оболонки.
15. Якщо використання пристрою викликає у дитини дискомфорт або кровотечу з ясен, проконсультуйтеся зі своїм стоматологом, перш ніж продовжувати його використання.
16. Діти можуть користуватися приладом лише під наглядом дорослих, які прочитали інструкцію з експлуатації.
17. Пристрій не є іграшкою - тримайте його подалі від дітей, щоб вони не використовували його без нагляду дорослого.
18. Пристрій використовується для особистої гігієни і не повинен використовуватися багатьма людьми в стоматологічних кабінетах.

2. ОПИС ПРИСТРОЮ




8. ГАРАНТІЙНА КАРТА

На виріб поширюється 24-місячна гарантія.
З умовами гарантії можна ознайомитися за посиланням:
<https://neno.pl/warranty>

Деталі, контакт та адресу веб-сайту можна знайти за адресою:
<https://neno.pl/contact>

Технічні характеристики та вміст комплекту можуть бути змінені без попередження.
Просимо вибачення за можливі незручності.

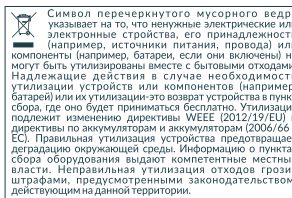

Виробник:
KGK Trade sp. z o.o. sp. s.
Ujastek 5b
31-752 Kraków
Польща

Зроблено в P.R.C.



3. ЗМІСТ ПАКЕТУ

1. Зубна щітка
2. Голова зі щетиною
3. Посібник користувача
4. Масажні головки:
a. Гумова головка для масажу ясен
b. Гумова головка для язика
c. Гумова головка для очищення щілин між зубами



4. СИЛА

1. Для належної роботи пристрою потрібен 1 шматок батареї AAA. Відкрутіть кришку вниз пристрою, щоб отримати доступ до місця для акумулятора. Кришка відсіку для батарейок утримується гвинтом, щоб дитина не мала доступу до джерела живлення пристрою. Відкрутіть кришку викрутою та вставте батарею AAA, як показано на схемі нижче.



Поставте кришку на місце і поверніть її, переконавшись, що вона залишається на місці. Горбок на кришці повинен знаходитися під нижньою стрілкою на корпусі перед поворотом, а під крапкою - після повороту кришки.

neno[®]
www.neno.pl
inspired by Children,
designed by Parents