

неноTM

camino

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Шановний Клієнт,


Придбаний вами Neno CAMINO - це подвійний електронний молоковідсмоктувач, який використовується для зціджування грудного молока після пологів. Будь ласка, прочитайте посібник користувача перед використанням пристрою.

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


- Завжди відключайте пристрій від напруги, якщо не потрібно його заряджати.
- Не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти або потрапити до ванни, кухонної раковини або умивальника.
- Молоковідсмоктувач та аксесуари до нього не стійкі до високих температур. Тримайте їх подалі від гарячих поверхонь і вогню.
- Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.
- Ніколи не залишайте пристрій, підключений до джерела живлення, без нагляду дорослих.
- Негайно припиніть користуватися пристроєм, якщо він впав на землю.
- Негайно припиніть користуватися пристроєм, якщо пошкоджений шнур живлення або штепсель.
- Не використовуйте прилад у ванні або під душем.
- Не розміщуйте пристрій під водою або в іншій рідині.
- Не мийте прилад під проточною водою.
- Не підключайте прилад до розетки живлення, яка стикалася з водою або іншими рідинами.
- Якщо прилад піддався впливу води або інших рідин - не торкайтеся пристрою, вимкніть його від живлення і зверніться до виробника.
- Пристрій призначений для використання одним користувачем. Використання молоковідсмоктувача більш ніж однією людиною несе ризик заподіяння шкоди здоров'ю користувача і анулює гарантію.
- Не ремонтуйте або не модифікуйте пристрій самостійно.
- Використовуйте молоковідсмоктувач тільки так, як описано в інструкції.
- Перед кожним використанням перевіряйте всі компоненти молоковідсмоктувача.
- Не нагрівайте зціжене молоко в мікрохвильовій печі. Молоко, розігріте в мікрохвильовій печі може обпекти рот дитини, тому що нагрівання з використанням мікрохвильових хвиль може створити бульбашки високої температури в рідині. Крім того, мікрохвильові хвилі можуть змінити склад молока.
- Не доводьте молоко до кипіння під час його нагрівання.
- Перед першим використанням молоковідсмоктувача вимийте і продезінфікуйте всі компоненти пристрою, які будуть вступати в прямий контакт з вашими грудьми або з вашим молоком.
- Після кожного використання молоковідсмоктувача вимийте всі компоненти пристрою, які входять у безпосередньому контакт з грудьми або з молоком.
- Будьте особливо обережні при використанні молоковідсмоктувача або його аксесуарів біля дітей.

2. ЕЛЕМЕНТИ

- Кришка *2
- Лійка (24мм) *2
- Муфта x2
- Кришка мембрани x2
- Мембрана x2
- Клапан x2
- Пляшка для молока x2
- Підставка для пляшки x2
- Соска для пляшки x2
- Кабель для зарядки пристрою
- Насосний пристрій
- Трубка

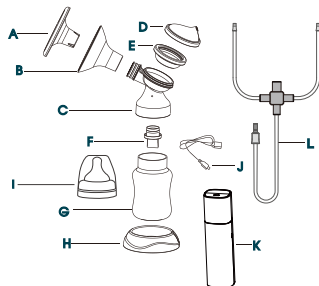


3. ЗНАЧКИ ДИСПЛЕЯ

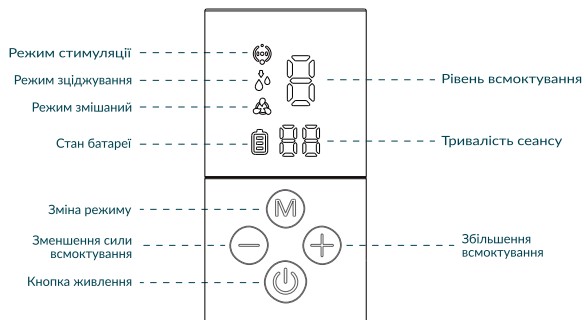

- Кнопка живлення** - утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб включити або вимкнути пристрій.
- Кнопка зміни режиму** - натисніть кнопку, щоб змінити режим роботи пристрою. Існує 3 режими роботи пристрою (Стимуляція, зціджування, змішаний). Пристрій автоматично переключатиметься з режиму стимуляції в режим зціджування через 2 хвилини.
- Змініть рівень всмоктування** - натисніть+, щоб збільшити всмоктування, або - щоб зменшити його.
(Режим стимуляції: L1-L5; режим зціджування: L1-L9; Режим змішаний: L1-L5).

4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

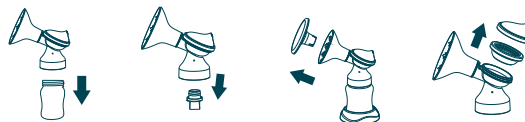

- Підключіть молоковідсмоктувач до джерела живлення. Заряджайте акумулятор пристрою протягом 2 годин.
- Від'єднайте компоненти молоковідсмоктувача, які будуть безпосередньо стикатися з грудьми або молоком.
- Відкрутіть пляшку від з'єднання.
- Потягніть клапан вниз, щоб від'єднати його від з'єднання.
- Зніміть кришку з лійки і зніміть лійку з з'єднання.
- Зніміть кришку мембрани і прокладку з з'єднання.
- Вимийте компоненти пристрою (зверніться до відділу очищення та дезінфекції)

5. ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Миття та дезінфекція-це дві різні речі. Вони повинні бути зроблені окремо, щоб захистити дитину і забезпечити правильну роботу молоковідсмоктувача.

Миття - Промивка поверхні приладу і видалення домішок.

Дезінфекція - знищення бактерій або вірусів, які можуть бути на поверхні пристрою

	Лійка	Компоненти молоковідсмоктувача (муфта, мембрана, кришка мембрани)	Пляшечка і соска
Дезінфекція	Миття і дезінфекція	Миття і дезінфекція	Миття і дезінфекція
Після кожного використання	Миття	Миття	Миття
Раз на день	Дезінфекція	Дезінфекція	Дезінфекція

Насосний пристрій, зарядний кабель, штекер не можна мити або дезінфікувати у воді. Не використовуйте щітки та інші предмети, які можуть пробити, пошкодити частини молоковідсмоктувача.

Від'єднайте всі частини молоковідсмоктувача одне від одного відразу після використання. Це допомагає запобігти розмноженню бактерій і формуванню осаду. Під час чищення та дезінфекції молоковідсмоктувача використовуйте лише воду, безпечну для пиття.

Миття в раковині




1. Від'єднайте всі частини молоковідсмоктувача один від одного, які мають прямий контакт з грудьми або з молоком.
2. Промийте вищезгадані елементи під проточною водою, щоб видалити залишки молока.
3. Замочіть частини молоковідсмоктувача в теплій мильній воді на 5 хвилин, потім промийте.
4. Дозвольте всім частинам молоковідсмоктувача висохнути природним шляхом.
5. Зберігайте компоненти комплекту в сухому місці, коли ви не використовуєте пристрій.

Дезінфекція кип'ятком



1. Заповніть каструлю водою і помістіть її на плиту. Води повинно бути достатньо, щоб всі компоненти молоковідсмоктувача повністю покривалися.
2. Доведіть воду до кипіння.
3. Помістіть компоненти молоковідсмоктувача на 10 хвилин в киплячу воду.
4. Дозвольте всім частинам молоковідсмоктувача висохнути природним шляхом.
5. Зберігайте компоненти комплекту в сухому місці, коли ви не використовуєте пристрій.


Очищення насосного пристрою

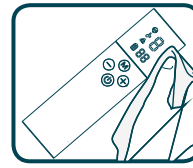


Насосний пристрій слід регулярно протирати вологою тканиною, щоб запобігти потраплянню пилу на пристрій. Не занурювати прилад під воду і не мийте його проточною водою. Не мийте прилад абразивними або хімічними речовинами.

6. ЗБІР МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧА

1. Ретельно вимийте руки водою з милом, перш ніж торкатися молоковідсмоктувача та грудей.
2. Підключіть мембрану та насосний пристрій до муфти.
3. Приєднайте ліжку до муфти. Помістіть клапан у муфту.
4. Підключіть трубку до кришки мембрани. Трубка може бути підключена до одного або двох молоковідсмоктувачів. (Див. нижче)

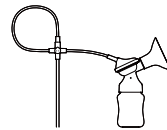

З'їджування з 1 мол.залози

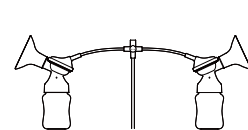

З'їджування з 2ох мол.залоз

Порада:

- a. Перед кожним використанням перевіряйте, чи не пошкоджені частини молоковідсмоктувача. У разі необхідності замініти пошкоджені елементи новими.
- b. Завжди перевіряйте чистоту частин пристрою перед використанням.
- c. Щоб уникнути пошкодження молоковідсмоктувача, переконайтесь, що всі його частини сухі перед початком використання.

7. ПІДЗАРЯДЖЕННЯ МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧА

Перед першим використанням необхідно зарядити молоковідсмоктувач до повної зарядки протягом 2х годин, підключивши його до джерела живлення за допомогою USB кабелю. Піктограма акумулятора на дисплеї буде повною, коли зарядка завершиться.



Повна миготлива батарея-низький заряд батареї, підключіть пристрій до зарядки.



Неповна миготлива батарея - батарея, підключена до зарядки, поточний стан зарядки батареї.







Повна батарея - повністю заряджена батарея.

Молоковідсмоктувач можна використовувати, коли пристрій підключено до зарядки. Акумулятор пристрою будуть заряджатися, коли ви підключите їх до джерела живлення. Акумулятор пристрою не буде заряджатися, коли насосний пристрій включено. Повністю зарядіть акумулятор молоковідсмоктувача перед тим, як покласти його на зберігання, якщо ви не збираєтесь використовувати пристрій протягом тривалого періоду часу. Зарядіть акумулятор пристрою до того, як він повністю розрядиться. Це продовжує термін служби батареї. Якщо молоковідсмоктувач зберігався в гарячому місці, акумулятор приладу може спочатку не спрацювати. Дайте молоковідсмоктувачу охолонути протягом години, перш ніж почати його використання.

08. ВИКОРИСТАННЯ МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧА

Якщо використовуєте режим з'їджування з однієї молочної залози, вставте кінець трубки в призначений для неї тримач.

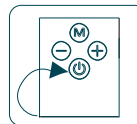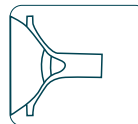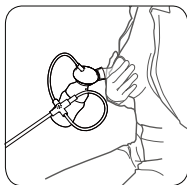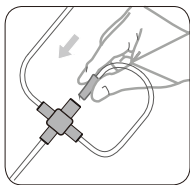

1. Покладіть ліжку на груди, слідкуючи, щоб сосок потрапив в середину дренажного каналу.
2. Великим і вказівним пальцями притисніть ліжку та з'єднання молоковідсмоктувача до грудей. Підтримуйте груди рукою.
3. Увімкніть молоковідсмоктувач, натискаючи кнопку живлення, і виберіть режим роботи, який вам підходить.
4. Натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути молоковідсмоктувач після використання та встановіть кришку на ліжку, щоб захистити пристрій від пилу.

Молоковідсмоктувач запам'ятовує недавно використані настройки рівня всмоктування у всіх режимах:

- a. молоковідсмоктувач починає роботу в режимі стимуляції. Встановіть зручний для вас рівень сили всмоктування за допомогою кнопок +/-
- b. через 2 хвилини молоковідсмоктувач автоматично включить режим з'їджування. Настроївши рівень сили всмоктування за допомогою кнопок + / -, щоб знайти найвищий рівень сили всмоктування, який зручний для вас. Якщо молоко почне витікати з грудей раніше, натисніть кнопку змінити режим, щоб вручну перейти в режим з'їджування.
- Режим з'їджування** - більш повільне накачування, яке м'яко і ефективно всмоктує молоко з грудей.
- c. У режимі з'їджування збільште силу всмоктування до тих пір, поки ви не відчуєте легкий дискомфорт (не біль) і зменшіть силу всмоктування на одну ступінь.
- d. **режим змішаний** - режим ніжного накачування. Увімкніть його, коли молоко тече з грудей мимовільно.

09. ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Розумний пристрій:

- a. 5 рівнів стимуляції, 5 рівнів з'їджування, 9 рівнів змішаного режиму.
- b. 3-фазова технологія з'їджування: режим стимуляції, режим з'їджування, змішаний режим.
- c. 4-фазна розумна функція: стимуляція / з'їджування / автоматизація / пам'ять
- 2. Конструкція для запобігання зворотного відтоку молока:**
Закрита система зливу молока гарантує, що воно не повертається в циркуляцію насоса, дозволяючи зберегти їжу свіжою і запобігти інфекції.
- 3. Ніжна силіконова накладка на груди:**
Еластична, ніжна накладка на груди зменшує тиск і допомагає масажувати груди, для поліпшення відтоку молока

4.Тихий і легкий:

Молоковідсмоктувач тихий і може використовуватися непомітно скрізь. Створений з думкою про мам, які постійно перебувають в русі і яким необхідно зціджувати молоко кілька раз на день.

5. Легко збирати та мити:

Молоковідсмоктувач має лише шість деталей для складання та очищення, що робить його дуже простим у використанні

6. Розумний сенсорний екран:

Цифровий дисплей із пам'яттю виконаних зливів молока і таймером дозволяє легко відстежувати роботу пристрою і його просту експлуатацію

7. Акумуляторна батарея з портом USB-C:

Потужний літій-іонний акумулятор, який підтримує до 2х годин роботи пристрою. Підключіть молоковідсмоктувач до мережі живлення за допомогою кабелю USB-C для підзарядки акумулятора.

8. Молоковідсмоктувач не містить Бісфенолу-А:

Молоковідсмоктувач і його аксесуари виготовлені з матеріалів, що не містять Бісфенолу-А. Молоковідсмоктувач сумісний з більшістю доступних дитячих пляшечок.

10. ПРИГОТУВАННЯ МОЛОКА

1. Не розморожуйте заморожене молоко в мікрохвильовій печі або в киплячій воді. Це може спричинити опік рота дитини
 2. Розморозьте молоко в холодильнику на ніч. Не заморозуйте знову розморожене молоко. Ви можете швидко розморозити молоко, тримаючи його під проточною водою температурою макс. 37°C.
 3. Помістіть закриту пляшку / пакетик в миску з теплою водою на 20 хвилин, щоб довести молоко до температури тіла.
 4. Не додавайте свіже зціджене молоко до раніше замороженого молока, якщо кількість свіжого молока перевищує кількість раніше замороженого молока.
- Годування:**
- a. Рекомендується годувати грудьми, перш ніж почати годувати дитину, використовуючи пляшку.
 - b. завжди перевіряйте пляшку, соску та інші компоненти до і після кожного годування. Якщо соска пошкоджена, негайно припиніть її використання.
 - c. Щоб уникнути ризику задусання дитини, перевірте соску, обережно потягнувши за її виступаючу частину.
 - d. Не намагайтеся збільшити отвір у сосці.
 - e. Немовлят не слід залишати без нагляду дорослих.
 - f. Соска не повинна використовуватися в якості пустышки для заспокоєння дитини .

11. FAQ

Насосний пристрій не запускається

Переконайтеся, що пристрій підключено до робочої розетки живлення. Якщо батарея розряджена і пристрій не підключений до джерела живлення, дисплей пристрою не запускається

Слабке всмоктування або його відсутність

Переконайтеся, що всі деталі пристрою щільно прилягають. Розберіть пристрій, перевірте, чи все в порядку чи деталі чисті та неущоджені, потім зберіть їх знову.

З грудей витекло більше молока, ніж може вмістити пляшка:

Вимкніть молоковідсмоктувач і від'єднайте його від живлення. Протріть молоковідсмоктувач вологою (не мокрою) тканиною. Коли всі компоненти пристрою висохнуть, складіть пристрій знову

12. ДОВГОСТРОКОВЕ ЗБЕРІГАННЯ

Пристрій оснащений батареєю і автоматично переходить в режим зберігання, коли воно не використовується протягом тривалого часу. Щоб відключити режим зберігання пристрою, підключіть його до електромережі не менше ніж на 2 години і повністю зарядіть акумулятор.

Перш ніж відкласти молоковідсмоктувач на більш тривалий період часу, переконайтеся, що:

- a. всі компоненти молоковідсмоктувача чисті.
- b. насосний пристрій чистий.
- c. акумулятор пристрою повністю заряджений.

13. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Вихідна потужність: 110-240V 50-60 Гц
Вхідна потужність: 5V 1A
Вага насоса: 276 г
Вага всього комплекту брутто: 1720 г
Розміри насоса: 15.1 x 4.2 x 3.7 см
Ємність і тип батареї: 3.7 в 1400 мАч Li-Ion

Сила всмоктування (одиначний режим):

Режим зціджування	L1	L2	L3	L4	L5				
Потужність всмоктування (кПа)	2	7,1	12,2	16,3	19,9				
Режим зливу молока	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
Потужність всмоктування (кПа)	16,2	19,8	22,7	28,7	33	37	39,9	42,4	45,5
Режим змішаний	L1	L2	L3	L4	L5				
Потужність всмоктування (кПа)	швидкий -15 повільний -30	швидкий -15 повільний -34	швидкий -15 повільний -38,4	швидкий -15 повільний -39,8	швидкий -15 повільний -42,4				

Подвійний режим

Режим зціджування	L1	L2	L3	L4	L5				
Потужність всмоктування (кПа)	14,5	16,1	18,9	20,2	21				
Режим зливу молока	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
Потужність всмоктування (кПа)	20,3	21,5	25,5	28,4	30	33,7	37,6	40,2	43,2
Режим змішаний	L1	L2	L3	L4	L5				
Потужність всмоктування (кПа)	швидкий -15 повільний -20	швидкий -15 повільний -28,2	швидкий -15 повільний -32,2	швидкий -15 повільний -36	швидкий -15 повільний -38,7				

15. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На виріб поширюється 24-місячна гарантія.
З умовами гарантії можна ознайомитися за посиланням: <https://nenop.pl/gwarancja>
Деталі, контактні дані та адресу веб-сайту можна знайти за адресою: <https://nenop.pl/kontakt>

Технічні характеристики та вміст комплекту можуть бути змінені без попередження. Просимо вибачення за незручності.



Розміщений символ перекресленого сміттевого кошика повідомляє, що електричні або електронні пристрої, його аксесуари (наприклад: блоки живлення, дрони) або компоненти (наприклад, батареї, якщо додається) не можна викидати разом з господарськими відходами. Належні дії у разі необхідності утилізації обладнання або їх компонентів (наприклад, батареї) полягає в здачі обладнання до Punktu Zboru, де воно приймається безкоштовно. Утилізація регулюється поправленою версією Директиви WEEE (2012/19 / EU) та Директивою про батареї та акумулятори (2006/66 / EC). Правильна утилізація пристрою запобігає погіршенню природного середовища. Інформація про пункти збору обладнання видається відповідними місцевими органами влади. Неправильна утилізація відходів загрожує штрафами, передбаченими чинним законодавством

Виробник:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
ul. Ujastek 5b
31-752 Kraków,
Польща
Виготовлено в Куманії



nenop[®]
www.nenop.pl
inspired by Children,
designed by Parents

неноTM

camino

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уважаемый Клиент,

Приобретенный вами Neno CAMINO - это двойной электронный молокоотсос, который используется для сцеживания грудного молока после родов.


Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием устройства.

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


1. Всегда отключайте устройство от напряжения, если не нужно его заряжать.
2. Не храните устройство в местах, где он может упасть или попасть в ванны, кухонной раковины или умывальника.
3. Молокоотсос и аксессуары к нему не устойчивы к высоким температурам. Держите их подальше от горячих поверхностей и огня.
4. Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.
5. Никогда не оставляйте устройство, подключенное к источнику питания, без присмотра взрослых.
6. Немедленно прекратите пользоваться прибором, если он упал на землю.
7. Немедленно прекратите пользоваться прибором, если поврежден шнур питания или штепсель.
8. Не используйте прибор в ванне или под душем.
9. Не размещайте устройство под водой или в другие жидкости.
10. Не мойте прибор под проточной водой.
11. Не подключайте прибор к розетке питания, которая соприкасалась с водой или другими жидкостями.
12. Если прибор подвергся воздействию воды или других жидкостей - не прикасайтесь устройству, отключите его от питания и обратитесь к производителю.
13. Устройство предназначено для использования одним пользователем. Использование молокоотсоса более чем одним человеком несет риск причинения вреда здоровью пользователя и аннулирует гарантию.
14. Не ремонтируйте или не модифицируйте устройство самостоятельно.
15. Используйте молокоотсос только так, как описано в инструкции.
16. Перед каждым использованием проверяйте все компоненты молокоотсоса.
17. Не нагревайте сцеженное молоко в микроволновой печи. Молоко, разогретое в микроволновой печи может обжечь рот ребенка, потому что нагрев с использованием микроволновых волн может создать пузыри высокой температуры в жидкости. Кроме того, свч волны могут изменить состав молока.
18. Не доводите молоко до кипения во время его нагревания.
19. Перед первым использованием молокоотсоса вымойте и продезинфицируйте все компоненты устройства, которые будут вступать в прямой контакт с вашей грудью или с молоком.
20. После каждого использования молокоотсоса вымойте все компоненты устройства, которые входят в непосредственном контакте с грудью или с молоком.
21. Будьте особенно осторожны при использовании молокоотсоса или его аксессуаров детьми

2. ЭЛЕМЕНТЫ

- A. Крышка *2
- B. Лейка (24мм) * 2
- C. Муфта x2
- D. Крышка мембраны x2
- E. Мембрана x2
- F. Клапан x2
- G. Бутылка для молока x2
- H. Подставка для бутылки x2
- I. Соска для бутылки x2
- J. Кабель для зарядки устройства
- K. Насосное устройство
- L. Трубка

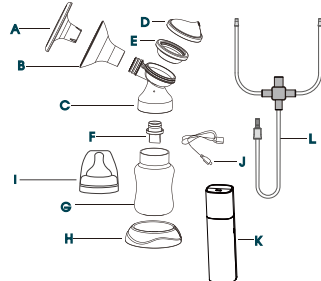


3. ЗНАЧКИ ДИСПЛЕЯ

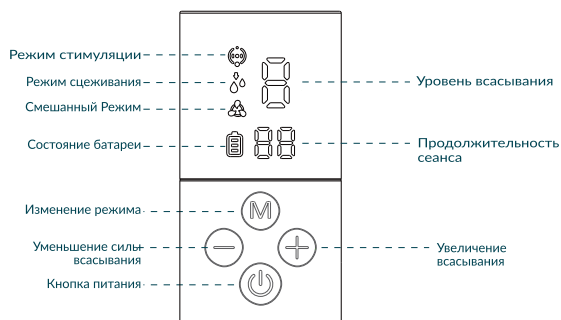

1. Кнопка питания - удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
2. Кнопка смены режима нажмите кнопку, чтобы изменить режим работы устройства. Существует 3 режима работы устройства (Стимуляция, сцеживание, смешанный). Устройство автоматически переключается из режима стимуляции в режим сцеживания через 2 минуты.
3. Измените уровень всасывания - нажмите+, чтобы увеличить всасывание, или - чтобы уменьшить его. (Режим стимуляции: L1-L5; режим сцеживания: L1-L9; Режим смешанный: L1-L5).

4. Состояние батареи значок батареи показывает состояние заряда батареи. Подключите устройство для зарядки, когда батарея близка к разрядке.
5. Время работы прибора - этот индикатор показывает, сколько минут прошло с момента включения молокоотсоса. Устройство автоматически выключится через 30 минут.
6. Уровень всасывания-показывает выбранный в настоящее время уровень силы всасывания.

4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

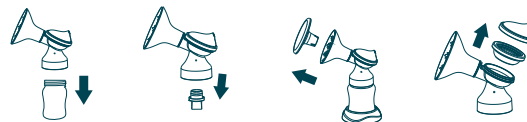

1. Подключите молокоотсос к источнику питания. Заряжайте аккумулятор устройства в течение 2 часов.
2. Отсоедините компоненты молокоотсоса, которые будут непосредственно соприкасаться с грудью или молоком
3. Открутите бутылку от соединения.
4. Потяните клапан вниз, чтобы отсоединить его от соединения.
5. Снимите крышку с лейки и снимите лейку с соединения.
6. Снимите крышку мембраны и прокладку с соединения.
7. Вымойте компоненты устройства (обратитесь в отдел очистки и дезинфекция)

5. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Мытье и дезинфекция - это две разные вещи. Они должны быть сделаны отдельно, чтобы защитить ребенка и обеспечить правильную работу молокоотсоса.

Мытье - Промывка поверхности прибора и удаление примесей.

Дезинфекция - уничтожение бактерии или вирусов, которые могут быть на поверхности устройства.

	Воронка	Компоненты молокоотсоса (муфта, мембрана, крышка мембраны)	Бутылочка и соска
Перед первым использованием	Мытье и дезинфекция	Мытье и дезинфекция	Мытье и дезинфекция
После каждого использования	Мытье	Мытье	Мытье
Раз в день	Дезинфекция	Дезинфекция	Дезинфекция

Насосное устройство, зарядный кабель, штекер не можно мыть и дезинфицировать в воде. Не используйте щетки и другие предметы, которые могут пробить, повредить части молокоотсоса. Отсоедините все части молокоотсоса друг от друга сразу после использования. Это помогает предотвратить размножение бактерий и формирование осадка. Во время чистки и дезинфекции молокоотсоса используйте только воду, безопасную для питья.

Мытье в раковине




1. Отсоедините все части молокоотсоса друг от друга, которые имеют прямой контакт с грудью или с молоком.
2. Промойте вышеупомянутые элементы под проточной водой, чтобы удалить остатки молока.
3. Замочите части молокоотсоса в теплой мыльной воде на 5 минут, затем промойте.
4. Позвольте всем частям молокоотсоса высохнуть естественным путем.
5. Храните компоненты комплекта в сухом месте, когда вы не используете устройство.

Дезинфекция кипящей водой



1. Заполните кастрюлю водой и поместите ее на плиту. Воды должно быть достаточно, чтобы все компоненты молокоотсоса полностью покрывались.
2. Доведите воду до кипения.
3. Поместите компоненты молокоотсоса на 10 минут в кипящую воду.
4. Позвольте всем частям молокоотсоса высохнуть естественным путем.
5. Храните компоненты комплекта в сухом месте, когда вы не используете устройство.


Очистка насосного устройства

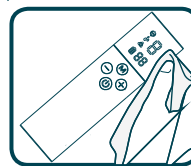


Насосное устройство следует регулярно протирать влажной тканью, чтобы предотвратить попадание пыли на устройство. Не погружайте прибор под воду и не мойте его проточной водой. Не мойте прибор абразивными и химическими веществами.

6. СБОР МОЛОКООТСОСА

1. Тщательно вымойте руки водой с мылом, прежде чем касаться молокоотсоса и груди.
2. Подключите мембрану и насосный устройство к муфте.
3. Присоедините воронку к муфте. Поместите клапан в муфту.
4. Подключите трубку к крышке мембраны. Трубка может быть подключена к одному или двум молокоотсосам. (См. ниже)

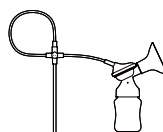

Сцеживание с 1 молочной железы

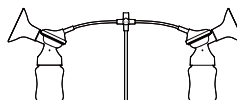

Сцеживание из 2х. желез

Совет:

- a. Перед каждым использованием проверяйте, не повреждены ли части молокоотсоса. В случае необходимости заменить поврежденные элементы новыми
- b. Всегда проверяйте чистоту частей устройства перед использованием.
- c. Чтобы избежать повреждения молокоотсоса убедитесь, что все его части сухие перед началом использования

07. ПОДЗАРЯДКА МОЛОКООТСОСА

Перед первым использованием необходимо зарядить молокоотсос до полной зарядки в течение 2х часов, подключив его к источнику питания с помощью USB кабеля. Значок аккумулятора на дисплее будет полным, когда зарядка завершится



Полная мигающая батарея - низкий заряд батареи, подключите устройство к зарядке.



Неполная мигающая батарея - батарея, подключенная к зарядке, текущее состояние зарядки батареи.





Полная батарея - полностью заряженная батарея.

Молокоотсос можно использовать, когда устройство подключено к зарядке. Аккумулятор устройства будет заряжаться, когда вы подключите его к источнику питания. Аккумулятор устройства не заряжается, когда насосное устройство включено. Полностью зарядите аккумулятор молокоотсоса перед тем, как положить его на хранение, если вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного периода времени. Зарядите аккумулятор устройства до того, как он полностью разрядится. Это продлевает срок службы батареи. Если молокоотсос хранился в горячем месте, аккумулятор прибора может сначала не сработать. Дайте молокоотсосу остыть в течение часа, прежде чем начать его использование.

08. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОКООТСОСА

Если используете режим сцеживания из одной молочной железы, вставьте конец трубки в предназначенный для нее держатель.

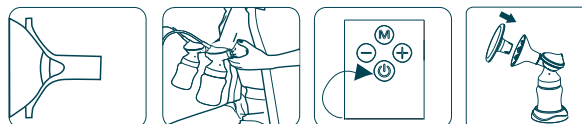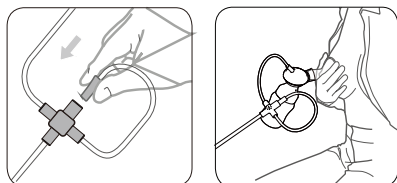

1. Положите воронку на грудь, следя, чтобы сосок попал в внутрь дренажного канала.
2. Большим и указательным пальцами прижмите воронку и соединения молокоотсоса к груди. Поддерживайте грудь рукой.
3. Включите молокоотсос, нажимая кнопку питания и выберите режим работы, который вам подходит.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить молокоотсос после использования и установите крышку на лейку, чтобы защитить устройство от пыли.

Молокоотсос запоминает недавно использованные настройки уровня всасывания во всех режимах:

- a. молокоотсос начинает работу в режиме стимуляции. Установите удобный для вас уровень силы всасывания с помощью кнопок +/-
- b. через 2 минуты молокоотсос автоматически включит режим сцеживания. Настроить уровень силы всасывания с помощью кнопок +/-, чтобы найти самый высокий уровень силы всасывания, который удобен для вас
- c. Если молоко начнет вытекать из груди раньше, нажмите кнопку изменить режим, чтобы вручную перейти в режим сцеживания.
- d. Режим сцеживания-более медленное накачивание, которое мягко и эффективно всасывает молоко из груди.
- e. В режиме сцеживания увеличьте силу всасывания до тех пор, пока вы не почувствуете легкий дискомфорт (не боль) и уменьшите силу всасывания на одну степень.
- f. режим смешанный - режим нежной накачки. Включите его, когда молоко течет из груди самопроизвольно.

09. ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Умное устройство:

- a. 5 уровней стимуляции, 5 уровней сцеживания, 9 уровней смешанного режима.
- b. 3-фазная технология сцеживания: режим стимуляции, режим сцеживания, смешанный режим.
- c. 4-фазная умная функция: стимуляция / сцеживание / автоматизация / память

2. Конструкция для предотвращения обратного оттока молока:

Закрытая система слива молока гарантирует, что оно не возвращается в циркуляцию насоса, позволяя сохранить пищу свежей и предотвратить инфекцию.

3. Нежная силиконовая накладка на грудь:

Эластичная, нежная накладка на грудь уменьшает давление и помогает массировать грудь, для улучшения оттока молока.

4. **Тихий и легкий:** Молокоотсос тихий и может использоваться незаметно везде. Создан с мыслью о мамах, которые постоянно находятся в движении и которым необходимо сцеживать молоко несколько раз в день.
5. **Легко собирать и мыть:** Молокоотсос имеет только шесть деталей для сборки и очистки, что делает его очень простым в использовании.
6. **Умный сенсорный экран:** Цифровой дисплей с памятью выполненных сливов молока и таймером позволяет легко отслеживать работу устройства и его простую эксплуатацию.
7. **Аккумуляторная батарея с портом USB-C:** Мощный литий - ионный аккумулятор, который поддерживает до 2х часов работы устройства. Подключите молокоотсос к сети питания с помощью кабеля USB-C для подзарядки аккумулятора.
8. **Молокоотсос не содержит Бисфенола-А:** Молокоотсос и аксессуары изготовлены из материалов, не содержащих Бисфенола-А. Молокоотсос совместим с большинством доступных детских бутылочек.

10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОКА

1. Не размораживайте замороженное молоко в микроволновой печи или в кипящей воде. Это может вызвать ожог рта ребенка.
2. Разморозьте молоко в холодильнике на ночь. Не замораживайте снова размороженное молоко. Вы можете быстро разморозить молоко, держа его под проточной водой температурой макс. 37°C.
3. Поместите закрытую бутылку / пакетик в миску с теплой водой на 20 минут, чтобы довести молоко до температуры тела.
4. Не добавляйте свежее сцеженное молоко к ранее замороженному молоку, если количество свежего молока превышает количество ранее замороженного молока.

Кормление:

- a. Рекомендуется кормить грудью, прежде чем начать кормить ребенка, используя бутылку.
- b. Всегда проверяйте бутылку, соску и другие компоненты до и после каждого кормления. Если соска повреждена, немедленно прекратите ее использование.
- c. Чтобы избежать риска удушья ребенка, проверьте соску, осторожно потянув за ее выступающую часть.
- d. Не пытайтесь увеличить отверстие в соске.
- e. Младенцев не следует оставлять без надзора взрослых.
- f. Соска не должна использоваться в качестве пустышки для успокоения ребенка.

11. FAQ

1. **Насосный устройство не запускается:** Убедитесь, что устройство подключено к рабочей розетке питания. Если батарея разряжена, дисплей устройства не запустится.
2. **Слабое всасывание или его отсутствие:** Убедитесь, что все детали устройства плотно прилегают. Разберите устройство, проверьте, все ли в порядке, детали чистые и невредимые, затем соберите их снова.
3. **Из груди вытекло больше молока, чем может вместить бутылка:** выключите молокоотсос и отсоедините его от питания. Протрите молокоотсос влажной (не мокрой) тканью. Когда все компоненты устройства высохнут, снова сложите устройство.

12. ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

1. Brystpumpen har et indbygget batteri. For at beskytte sig mod skader går enheden i en opbevaringstilstand efter en lang periode med inaktivitet. For at deaktivere opbevaringstilstanden skal du slutte enheden til strømmen og oplade den i 2 timer.
2. **Inden du lægger brystpumpen væk i lang tid, skal du sikre, at:**
- a. Alle dele af brystpumpen er rene.
- b. Pumpeanordningen er ren.
- c. Enhedens batteri er fuldt opladet.

13. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Выходная мощность: 110-240V 50-60 Гц
Входная мощность: 5V 1A
Вес насоса: 276 г
Вес всего комплекта брутто: 1720 г
Размеры насоса: 15.1 x 4.2 x 3.7 см
Емкость и тип батареи: 3.7 в 1400 мАч Li-Ion

Сила всасывания (одиночный режим):

Режим сцеживания	L1	L2	L3	L4	L5				
Мощность всасывания (kPa)	2	7,1	12,2	16,3	19,9				
Sugetilstand	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
Мощность всасывания (kPa)	16,2	19,8	22,7	28,7	33	37	39,9	42,4	45,5
Udmalkningstilstand	L1	L2	L3	L4	L5				
Мощность всасывания (kPa)	Быстрый -15 медленный -30	Быстрый -15 медленный -34	Быстрый -15 медленный -38,4	Быстрый -15 медленный -39,8	Быстрый -15 медленный -42,4				

Двойной режим

Режим сцеживания	L1	L2	L3	L4	L5				
Мощность всасывания (kPa)	14,5	16,1	18,9	20,2	21				
Sugetilstand	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
Мощность всасывания (kPa)	20,3	21,5	25,5	28,4	30	33,7	37,6	40,2	43,2
Udmalkningstilstand	L1	L2	L3	L4	L5				
Мощность всасывания (kPa)	Быстрый -15 медленный -20	Быстрый -15 медленный -28,2	Быстрый -15 медленный -32,2	Быстрый -15 медленный -36	Быстрый -15 медленный -38,7				

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На изделие распространяется 24-месячная гарантия. С условиями гарантии можно ознакомиться по ссылке: <https://nenopl/gwarancja>
Детали, контактные данные и адрес веб-сайта можно найти по адресу: <https://nenopl/kontakt>

Технические характеристики и содержимое комплекта могут быть изменены без предупреждения. Просим прощения за неудобства.



Символ перечеркнутого мусорного ведра указывает на то, что ненужные электрические или электронные устройства, его принадлежности (например, источники питания, провода) или компоненты (например, батареи, если они включены) не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Надлежащие действия в случае необходимости утилизации устройств или их компонентов (например, батарей) или их утилизации-это возврат устройства в пункт сбора, где оно будет приниматься бесплатно. Утилизация подлежит изменению директивы WEEE (2012/19/EU) и директивы по аккумуляторам и аккумуляторам (2006/66 / EC). Правильная утилизация устройства предотвращает деградацию окружающей среды. Информацию о пунктах сбора оборудования выдают компетентные местные власти. Неправильная утилизация отходов грозит штрафами, предусмотренными законодательством, действующим на данной территории.

Производитель:
KGK Trade sp. z o.o. s.p. k.
ul. Ujastek 5b
31-752 Краков,
Польша
Сделано в Китае



nenopl
www.nenopl
inspired by Children,
designed by Parents