

нено[®]

sinus

Посібник


Ua



5. ВСТАНОВЛЕННЯ

- Помістіть кришку для запобігання зворотного виділення на контейнер
- Помістіть контейнер з кришкою в поглиблення пристрою
- Помістіть зовнішню кришку контейнера на пристрій і закріпіть її на місці, обертуючи її за годинниковою стрілкою, щоб переконавшись, що пристрій повинен функціонувати
- Виберіть відповідний силіконовий наконечник і помістіть його на зовнішню кришку контейнера.

Переконайтеся, що під час установки всі компоненти були поміщені в пристрій в правильному порядку, а зовнішня кришка була прикріплена за годинниковою стрілкою. Під час складання пристрою переконайтеся, що ущільнення правильно розташовані в резервуарі і корпусі пристрою. Якщо будь-яка з ущільнень не перебуває на відповідній частині пристрою, це вплине на функцію всмоктування пристрою

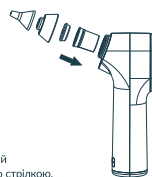

6. СИЛІКОНОВІ НАКОНЕЧНИКИ

- Наконечники в формі міхура (плоскі, похилі)
Вони служать для чищення Носов новонароджених. Більш короткі кінчики краще підходять до носів новонароджених дітей, а пухляста частина наконечника блокує ніздрю, полегшуючи відсмоктування виділення. Похилий наконечник можна використовувати для очищення стінок ніздрі і легше всмоктує секретцію, прилеглу всередині носа.
- Воронкоподібні наконечники (плоскі, похилі)
Він служить для чищення шкарпеток у дітей старше 1 року. Воронкоподібний наконечник проникає глибше в ніс, тому він краще підходить для використання з дітьми які вже виросли. Похилий наконечник можна використовувати для очищення стінок ніздрі і легше всмоктує секретцію, прилеглу всередині носа.

7. ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

- Зберіть пристрій відповідно до інструкції в розділі "Установка", переконайтеся, що ущільнення розташовані на корпусі аспілятора і що на зовнішній кришці контейнера встановлений відповідний силіконовий наконечник. Виберіть режим всмоктування, відповідний ситуації, в якій ви використовуєте аспіратор.
а. Якщо виділення в носі дитини сухі, поміжте його за допомогою сольового розчину перед використанням електричного аспілятора
б. Якщо виділення розбавлені, ви можете використовувати аспіратор безпосередньо для його вилучення.
с. Якщо ви не бачите виділення, але дитина "хрипить" при диханні носом, це також свідчить про закладеності носа. Рекомендується обережно стимулювати носик, щоб дитина чхнув і відсисав викинуті виділення аспіратором.
2. Рекомендований спосіб використання
Перш ніж використовувати аспіратор на дитину, перевірте силу пристрою на верхній частині руки і відрегулюйте режим роботи пристрою до рівня, який вам здається найбільш підходящим.

Шановний клієнт,
придбаний вами продукт Evorel Sinus - це електричний аспіратор, який використовується для відсмоктування секрету з дитячого носа. Пристрій призначене для роботи з новонародженими і дітьми старше одного року. Перед використанням машини, будь ласка, прочитайте додається керівництво.

1. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Продукт не іграшка-не дозволяйте дітям гратися з ним.
- Перевірте силу всмоктування на тильній стороні руки дорослого перед використанням.
- Використовуйте кабель USB, що входить в комплект поставки, щоб переконавшись, що напруга зарядки відповідає параметрам пристрою.
- Не заряджайте пристрій під час використання.
- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу (Не менше 3 місяців), зробіть повну зарядку його акумулятор перед зберіганням.
- Не розбивайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно. У разі виникнення несправностей зверніться в сервісний центр.

2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Змінні силіконові наконечники
Чотири типу наконечників, що входять в комплект, дозволяють адаптувати пристрій до віку і потребам вашої дитини.
- Три швидкості всмоктування
Ніжний, помірний і сильний режим всмоктування, між якими ви можете вільно вмикати, щоб адаптувати його роботу до потреб вашої дитини.
- Вбудований таймер
Пристрій автоматично відключається після трьох хвилин використання, щоб запобігти непотрібну розрядку акумулятора.
- Безпечний дизайн
Розміщення пристрою під кутом 90 градусів робить його безпечним для використання, і його неможливо вставити занадто глибоко в ніс дитини.
- Освітлення
Додатковий, окремо включається світлодіодний індикатор на пристрої дозволяє використовувати аспіратор навіть вночі. Ніжний, теплий світло не буде дратувати очі або шкіру дитини і дозволяє легше бачити внутрішню частину носа.
- Легко мийтеся і водонепроникний
Аспіратор має водонепроникний рейтинг IPX6, тому його можна мити під проточною водою. Будь ласка, не занурюйте прилад під воду. Наконечники і ємність для виділення можна виийати з пристрою, що дозволяє більш ретельно вимити аспіратор з що залишився осаду

! Підключіть пристрій до зарядки за дві години до першого використання, щоб продовжити термін служби акумулятора.

Кнопка живлення:

- натискання - режим м'якого всмоктування
- натискання - режим помірного всмоктування
- натискання - режим сильного всмоктування

Натискання кнопки харчування при включеному режимі сильного всмоктування вимикає пристрій

8. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ

- Наконечники і контейнер для виділень можна витягнути з пристрою і вмити окремо. Їх також можна промити під проточною водою за допомогою зубної щітки.
- Ви можете використовувати ватний тампон на паличці, змоченою в медичному спирті, щоб вимити вихід повітря.
- Перед повторної складанням переконайтеся, що всі компоненти приладу сухі, щоб запобігти накопичення бактерій.
- Не використовуйте абразивні або корозійні засоби для чищення при очищенні пристрою. це може негативно вплинути на його термін служби.
- Перед кожним використанням переконайтеся, що прилад був правильно вимитий і жодна його частина НЕ промочена, щоб уникнути накопичення бактерій і ослаблення сили всмоктування.
- Вимийте прилад під час очищення.
- Не занурюйте прилад під воду

9. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Вихідна напруга:	5V
Напруга під час роботи:	3.7 V
потужність:	2.2 Вт
Акумуляторна батарея:	літєва, 400mAh
водонепроникний:	IPX6
вага:	153g
розміри:	154x32x70 мм (Без силіконового наконечника)

- Маленький і портативний
Пристрій легке і просте у використанні завдяки зручній ручці і великим кнопкам. Завдяки вбудованій батареї пристрій портативний.
- Місткий акумулятор
Пристрій має вбудовану літєвою батареї ємністю 400 mAh, яку можна заряджати через порт micro USB

3. ОПИС ПРИСТРОЇ



4. ЕЛЕМЕНТИ НАБОРУ

- Силіконовий бульбашковий наконечник (плоский)
- Силіконовий бульбашковий наконечник (похилий)
- Воронкоподібний силіконовий наконечник (плоский)
- Воронкоподібний силіконовий наконечник (похилий)
- Контейнер для виділення
- Кришка для запобігання витоків з контейнера
- Зовнішня кришка контейнера
- Кабель USB (для зарядки)

10. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Продукт поставляється з 24-місячної гарантією.
Умови гарантії ви можете знайти на сайті: <https://nenop.pl/gwarancja>

Подробиці, контакти та адресу сервісу можна знайти на сайті:
<https://nenop.pl/kontakt>

Специфікації і вміст комплекту можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Принісимо вибачення за доставлені незручності



Розміщений символ перекресленого сміттевого кошика повідомляє, що електричні або електронні пристрої, його аксесуари (наприклад: блоки живлення, дроти) або компоненти (наприклад, батареї, якщо додається) не можна викидати разом з господарськими відходами. Належні дії у разі необхідності утилізації обладнання або їх компонентів (наприклад, батарей) полягає в здачі обладнання до Punktu Zboru, де воно приймається безкоштовно. Утилізація регулюється поправленою версією Директиви WEEE (2012/19 / EU) та Директивою про батареї та акумулятори (2006/66 / EC). Правильна утилізація пристрою запобігає погіршенню природного середовища. Інформацію про пункти збору обладнання видіється відповідними місцевими органами влади. Неправильна утилізація відходів загрожує штрафами, передбаченими чинним законодавством

Виробник:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Os. Urocz 12
31-953 Kraków
Польща
Виготовлено в Р. Р. С.



нено[®]
www.nenop.pl
inspired by Children,
designed by Parents

BY Xblitz.